




theradome

TECHNOLOGIE POUR LA CROISSANCE
CAPILLAIRE

MODE D'EMPLOI



Theradome, Inc.
4900 Hopyard Road, Suite 100,
Pleasanton, CA 94588
1-855-549-6757
support@theradome.com



Advena Ltd.
Tower Business Centre
2nd Flr, Tower Street
Swater, BKR 4013, Malta



THERADOME® PRO LH 80



theradome

THERADOME® EVO LH 40



A lire impérativement

Nous vous recommandons de lire toutes les instructions de ce manuel avant de commencer à utiliser votre appareil. Vérifiez que vous êtes un candidat au Theradome en utilisant l'échelle de Hamilton-Norwood pour les hommes ou l'échelle de Ludwig-Savin pour les femmes dans ce livret.



Ce symbole d'avertissement apparaît à côté d'informations sur les risques éventuels pour la sécurité. Veillez à respecter toutes les mises en garde et informations de sécurité. Conservez ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.

Si vous êtes suivi(e) par un médecin, veuillez le/la contacter pour tout problème médical éventuel avant d'utiliser votre appareil Theradome.

Vous pouvez nous envoyer un e-mail à l'adresse support@theradome.com ou nous appeler depuis les États-Unis au +1-855-549-6757. Notre centre d'assistance répond également à plus de 1 000 questions sur Theradome et la perte de cheveux. Veuillez consulter : theradome.com/help-center

Contenu

Bienvvenue	Qu'est-ce que le Theradome ?4
	Comment cela fonctionne-t-il?4
	Est-ce sans danger ?4
Identification de votre appareil	Comment identifier votre Theradome.....5
	Theradome PRO.5
	Theradome EVO.6
	Qu'y a -t-il dans la boîte ?7
	Theradome PRO.7
	Theradome EVO.7
Usage prévu	Conseils d'utilisation.....8
	Contre-indications.8
	Avertissements.....9
	Que signifient ces symboles ? 11
Type de perte de cheveux et type de peau	Échelle Hamilton-Norwood de la perte de cheveux pour les hommes.12
	Échelle de Ludwig-Savin de la perte de cheveux pour les femmes13
	Types de peau Fitzpatrick14
Caractéristiques de l'appareil	Modes de l'interrupteur principal, Fonctions et contrôle du volume. 15
	Indications lumineuses de l'interrupteur principal durant la charge 16
	Indications lumineuses de l'interrupteur principal durant le traitement 16
	Lecteur du compteur.....17
	Fonctionnement.18
	Theradome PRO.....19
	Theradome EVO.....19
Traitement	Programme de traitement21
	Etapas du traitement.22
Photos avant et après	Prendre des photos avant-après.23
	Votre dossier personnel.....24
Conseils d'entretien	Conseils de nettoyage.....25
	Fonctionnement et environnement de stockage25
FAQ	FAQ.26
Dépannage Garantie	Dépannage28
	Garantie et politique de remboursement.31

Bienvenue

Qu'est-ce que le Theradome ?

Le Theradome PRO et le Theradome EVO sont des appareils de photothérapie au laser (LLLT) utilisés pour favoriser la croissance des cheveux. Ce sont des casques légers, à taille unique, que vous pouvez porter pour des traitements à domicile. Les appareils Theradome PRO et Theradome EVO utilisent tous deux des diodes de lumière cohérente pour un fonctionnement mains libres pendant le traitement. Les appareils proposent des traitements guidés par la voix avec une minuterie sonore intégrée qui éteint automatiquement l'appareil une fois le traitement terminé.

Comment cela fonctionne-t-il ?

- Les appareils Theradome PRO et Theradome EVO utilisent la photothérapie laser (LLLT) de pointe pour stimuler la base des follicules pileux au niveau cellulaire. La technologie laser avancée de Theradome a trois effets :
- Ralentir et arrêter la chute des cheveux
- épaissir les follicules pileux existants
- Favoriser la croissance de nouveaux cheveux

Est-ce sans danger ?

Absolument ! Les appareils Theradome PRO et Theradome EVO utilisent une lumière cohérente froide (ou de faible niveau), qui pénètre le cuir chevelu pour atteindre la base des follicules pileux, sans aucun effet secondaire.

De nombreuses études confirment que la LLLT n'a aucun effet secondaire nocif. Il est toutefois recommandé de lire toutes les précautions de ce manuel avant de commencer le traitement..

THERADOME PRO



THERADOME EVO



Identification de votre appareil

THERADOME PRO LH80



- (A) Taquets en caoutchouc :
Permettent un réglage doux et confortable
- (B) 80 ouvertures de lampes :
Permettent une émission précise du faisceau de lumière
- (C) Haut-parleur :
Réponse audio pour les différents modes de l'interrupteur principal
- (D) Numéro de série :
Numéro de série utilisé pour la garantie




- (E) Interrupteur principal :
Contrôle le système et assure le retour d'information
- (F) Micro-USB :
Port de recharge

Placez le casque sur votre tête de manière à ce que l'Interrupteur Principal se trouve à l'arrière de votre tête.

Identification de votre appareil

THERADOME EVO LH40

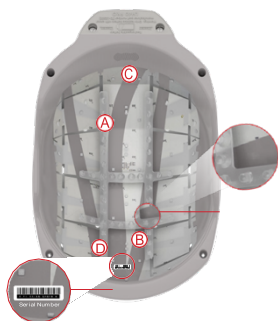

- (A)** Taquets en caoutchouc :
Permet un réglage souple et confortable
- (B)** 40 ouvertures de lampes :
Permet l'émission précise d'un faisceau de lumière cohérente
- (C)** Haut-parleur :
Réponse audio pour les nombreux modes de l'interrupteur principal
- (D)** Numéro de série :
Numéro de série utilisé pour la garantie



- (E)** Interrupteur principal :
Contrôle le système et fournit le feedback
- (F)** Micro-USB :
Port de recharge

Placez le casque sur votre tête de manière à ce que l'Interrupteur Principal se trouve à l'arrière de votre tête.

Qu'y a-t-il dans la boîte ?



Theradome PRO

ou



Theradome EVO



Adaptateur
secteur avec
câble micro USB



Coussinets en mousse



Housse de protection



Mode d'emploi et Guide de
démarrage rapide

Mode d'emploi

Les appareils Theradome PRO et Theradome EVO sont des appareils thérapeutiques en vente libre destinés à traiter l'alopecie androgénique et à favoriser la repousse des cheveux chez les hommes présentant des schémas de perte de cheveux de IIa à V selon la classification de Hamilton-Norwood, et à traiter l'alopecie androgénique et à favoriser la repousse des cheveux chez les femmes présentant les échelles de Ludwig-Savin I-1 à I-4, II-1, II-2, ainsi que les types de peau de Fitzpatrick I à IV.

Contre-indications

Les appareils Theradome ne doivent pas être utilisés en cas de cancer actuel ou passé du cuir chevelu. La lumière cohérente stimule l'activité des cellules saines et malsaines.



Si vous suivez un traitement contre le cancer, nous vous recommandons de consulter votre médecin pour tout avis médical. Le Theradome n'a pas été testé sur des personnes atteintes d'un cancer du cuir chevelu.

Nous vous déconseillons d'utiliser le Theradome pendant la grossesse ou l'allaitement. Utilisez le Theradome après avoir terminé l'allaitement.

Les dispositifs Theradome ne doivent pas être utilisés par des personnes ayant un réservoir Ommaya sous le cuir chevelu sans l'accord d'un spécialiste.

Cessez d'utiliser l'appareil dès qu'il semble présenter un dysfonctionnement.

Mises en garde



- ⚠ NE PAS utiliser le chargeur si le câble ou la fiche sont endommagés.
- ⚠ NE PAS utiliser le casque Theradome ou son alimentation électrique si l'un ou l'autre a été exposé à l'eau ou à un liquide.
- ⚠ NE PAS utiliser le casque Theradome comme un dispositif de protection de la tête. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé de cette manière.
- ⚠  NE PAS ne pas placer l'appareil ou son système de charge à proximité d'eau ou de liquide. En cas d'exposition à toute substance liquide, débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant. Si le casque est tombé dans l'eau ou dans tout type de liquide, DO NOT essayer de ramasser le casque, NE PAS entrer en contact avec la (les) substance (s).
- ⚠ NE PAS utiliser votre casque Theradome si vos cheveux sont mouillés. NE PAS utiliser le casque Theradome si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, à moins que votre médecin n'ait donné son accord.
- ⚠ NE PAS utiliser le casque Theradome si vous avez ou avez eu un cancer du cuir chevelu. La lumière cohérente stimule l'activité des cellules saines et malignes. Veuillez consulter votre médecin.
- ⚠ NE PAS laisser tomber ou insérer des objets dans les événements ou les ouvertures de l'appareil. Les lumières du casque sont sensibles aux décharges électrostatiques.
- ⚠ NE PAS exposer la partie inférieure du casque Theradome à l'électricité statique ou à d'autres sources de haute tension.
- ⚠ NE PAS charger le casque Theradome dans une prise de courant bloquée par un meuble ou difficilement accessible en cas de danger.
- ⚠ NE PAS utiliser des accessoires, des pièces détachées et des matériaux à des fins non liées à l'utilisation correcte de l'appareil.
- ⚠ Le fait de porter le casque Theradome à proximité d'autres appareils électroniques ne présente pas de risque significatif d'interférence électromagnétique. L'utilisation d'un miroir ou d'une lentille pour diriger la lumière vers l'œil augmente les risques potentiels pour les yeux.
- ⚠  Gardez le casque Theradome hors de portée des enfants et des animaux domestiques..

- ⚠ Utilisez le casque Theradome **UNIQUEMENT** pour l'usage auquel il est destiné, comme décrit dans ce manuel.
- ⚠ Pour éviter toute surchauffe pendant le traitement, utilisez **TOUJOURS** le casque Theradome à l'écart de toute source de chaleur, y compris la lumière du soleil.

Pour éviter tout dommage ou toute blessure éventuelle, **NE PAS** stocker le casque Theradome dans des endroits poussiéreux, humides ou sales, ou dans un environnement où la température est glaciale (inférieure à 0°C). Lorsque vous utilisez le casque Theradome, faites **TOUJOURS** preuve de prudence afin d'éviter : 1) l'étranglement dû aux câbles de charge, 2) les réactions allergiques potentielles aux matériaux du casque et de l'équipement, et 3) les blessures par contact.

du casque et de l'équipement, et 3) les blessures par contact.

Que signifient les symboles ?

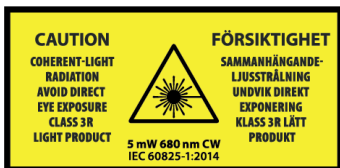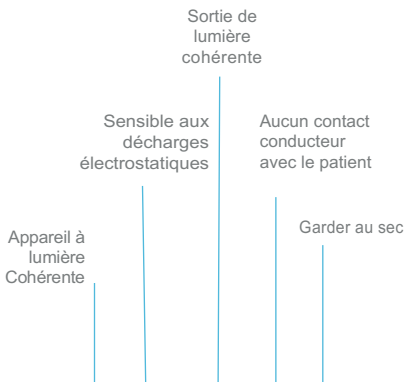

Échelle Hamilton-Norwood de la perte de cheveux pour les hommes

Le Theradome PRO et le Theradome EVO sont des dispositifs thérapeutiques en vente libre destinés à traiter l'alopecie androgénique et à favoriser la pousse des cheveux chez les hommes présentant une perte de cheveux de type IIa à V selon la classification de Hamilton-Norwood et des types de peau I à IV selon Fitzpatrick, comme indiqué ci-dessous.:

Hamilton-Norwood Scale Male Hair Loss Classification



Theradome PRO and EVO are FDA cleared to effectively and safely treat hair loss levels IIa, III, IIIa, III vertex, IV, IVa and V


Theradome PRO et EVO sont autorisés par la FDA pour traiter efficacement et en toute sécurité la perte de cheveux de niveaux IIa, III, IIIa, III vertex, IV, IVa et V.

Information: Le traitement des autres niveaux n'a pas été documenté.

Échelle Ludwig-Savin de la perte de cheveux pour les femmes

Le Theradome PRO et le Theradome EVO sont des dispositifs thérapeutiques en vente libre destinés à traiter l'alopecie androgénique et à favoriser la repousse des cheveux chez les femmes présentant des schémas de perte de cheveux selon l'échelle de Ludwig-Savin de I-1 à I-4, II-1, II-2 avec des types de peau de Fitzpatrick I à IV, comme indiqué ci-dessous :

Ludwig-Savin Scale Female Hair Loss Classification

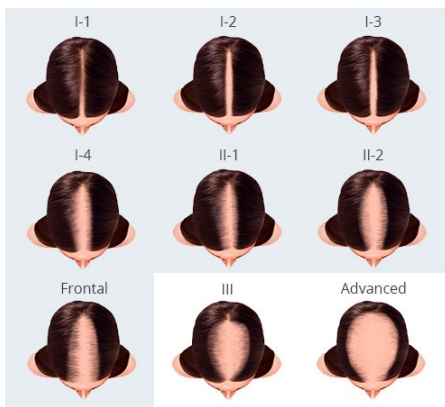

Theradome PRO and EVO are FDA cleared to effectively and safely treat hair loss levels I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, II-2 and frontal hair loss


Information : Le traitement des niveaux Frontal, III et Avancé n'a pas été documenté.

Type de peau selon Fitzpatrick

Comparez votre type de peau au tableau ci-dessous. Les appareils Theradome PRO et Theradome EVO ont été approuvés par la FDA pour favoriser la pousse des cheveux dans les types de peau 1 à 4.

L'échelle des types de peau de Fitzpatrick

Le Theradome a été testé pour traiter efficacement les types de peau : 1, 2, 3 et 4.

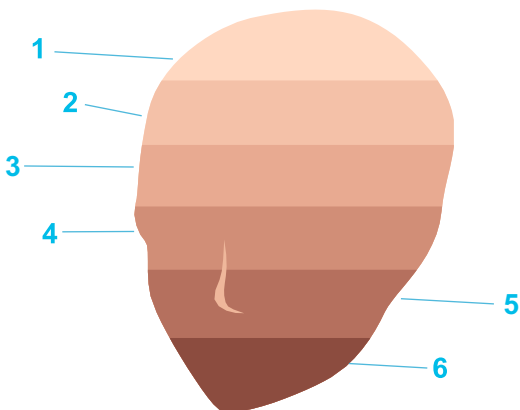

Information : Le traitement des types de peau 5 et 6 n'a pas été documenté en raison du nombre limité de sujets testés.

Modes et fonction de l'interrupteur principal

En charge :



Appuyez brièvement sur la touche et relâchez-la pour entendre un message vocal indiquant le nombre de traitements effectués.

(Voir la section "Lecteur de compteur de durée de vie", p. 17).

Mode de traitement :

Appuyez sur l'interrupteur principal pendant 1 seconde (sans le maintenir enfoncé) pour allumer le casque.

Votre casque indique "Prêt pour le traitement, placez sur la tête".

Pendant un traitement sur votre tête, double-cliquez pour modifier le volume de la voix. Les choix sont HIGH, MEDIUM, LOW et MUTE.

Appuyez et maintenez enfoncé pendant 4 secondes pour passer en mode veille profonde pour l'expédition et/ou le stockage à long terme ; reprenez le fonctionnement normal en branchant le chargeur.

Mode pause du système :

Connectez le casque au chargeur et branchez le chargeur sur une prise de courant. Le casque indique "Reprise du système".

Débranchez le chargeur et appuyez sur le bouton de l'interrupteur principal pour commencer un traitement.

(Voir p. 29 pour plus d'informations sur le système en pause).

indications lumineuses de l'interrupteur principal

En charge



Fondu rouge-orange :
Batterie faible ; en charge.

Fondu Orange-Jaune :
Batterie en charge.

Fondu Jaune-Vert :
Charge presque terminée.

Vert : Vert foncé, charge terminée.

Orange clignotant :
Adaptateur de charge ; le port USB a perdu son alimentation ou la batterie est usée et doit être remplacée

Durant le traitement



Vert clair clignotant :
Mode veille ; placer sur la tête selon les instructions verbales.



Vert clair permanent :
Traitement en cours.



Orange clignotant :
Traitement interrompu en raison d'une anomalie - par exemple : erreur de traitement ; appuyez sur pour réessayer. Voir la section de dépannage.



Rouge clignotant :
La batterie a été remplacée, l'interrupteur principal a été enfoncé pendant plus d'une seconde ou un nouveau micro logiciel a été installé, ce qui a entraîné la réinitialisation du système. Voir la section de dépannage.

* S'allume et s'éteint par intervalles de 1/4 seconde.

** Le clignotement est défini comme une succession de clignotements

toutes les 2 secondes avec la même couleur.

Compteur de traitements

Compteur de traitement

Le compteur de traitements permet de suivre toutes les séances effectuées sur PRO et EVO. Utilisez le compteur pour contrôler le nombre de séances de traitement que vous avez effectuées à ce jour.



Accédez au compteur en appuyant sur l'interrupteur principal pendant que votre appareil est en charge ou avant de commencer chaque traitement. Vous entendrez un message vocal indiquant le nombre total de traitements effectués.

THERADOMEPROLH80



THERADOMEVOLH40



Mode Traitement

Appuyez sur l'interrupteur principal pour lancer le traitement. Placez le casque sur votre tête. Les lumières s'allument et le traitement commence.



Si vous retirez le casque de votre tête, le traitement en cours sera interrompu. Vous avez jusqu'à 5 minutes pour reprendre le traitement avant qu'une session ne soit terminée.

(Voir la section " Indications lumineuses de l'interrupteur principal pendant le traitement ", p. 16).

Arrêt

L'appareil s'éteint automatiquement lorsque le traitement est terminé. Pour interrompre une session en cours, appuyer sur l'interrupteur principal et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que la voix indique "Traitement interrompu".



Démarrage - Fonctionnement

Étape 1: Charger le Theradome pendant 2-3 heures avant utilisation



Fixez l'extrémité du câble USB à l'adaptateur secteur.

Lorsqu'il est branché, l'interrupteur principal émet des impulsions et alterne les couleurs jusqu'à ce qu'il soit chargé.

N'oubliez pas d'utiliser une prise accessible pour charger le Theradome si vous devez le débrancher en cas de danger.



Branchez l'adaptateur secteur sur une prise permettant au Theradome de reposer à la verticale dans un endroit sûr, comme illustré à gauche.



Fixez l'extrémité du câble micro-USB à la bonne prise. Cette prise est située sous l'interrupteur principal à l'arrière du Theradome.

Le chargement du Theradome dépend de la fréquence de vos traitements.

Si vous l'utilisez fréquemment, nous vous recommandons de charger votre casque toutes les 4 à 5 séances de traitement ou après avoir reçu un avertissement de batterie faible. Si vous prévoyez d'effectuer des traitements peu fréquents, veuillez garder votre casque chargé en permanence afin de pouvoir effectuer des séances selon les besoins.

Voir la section " Indications lumineuses de l'interrupteur principal pendant la charge ", p. 16).

Démarrage - Fonctionnement

Étape 2: Préparer votre cuir chevelu pour le traitement.

Votre Theradome peut être utilisé à tout moment du jour ou de la nuit. Le Theradome est efficace sur les cheveux secs ou humides, certains utilisateurs humidifient légèrement leurs cheveux et utilisent un peigne ou une brosse pour exposer davantage la zone de traitement souhaitée.

N'utilisez pas le Theradome avec des cheveux mouillés pour éviter que l'eau ne pénètre dans l'appareil.

Étape 3 : Commencez votre séance de traitement.

Appuyez et relâchez brièvement (moins d'une seconde),

l'interrupteur principal de votre Theradome entièrement

chargé pour passer en mode traitement. Placez le

Theradome sur votre tête pour commencer votre traitement.

Étape 4 : Profitez de votre séance de traitement.

Vous pouvez pratiquer des activités légères pendant votre traitement, comme naviguer sur Internet ou regarder la télévision. Évitez les activités plus intenses comme le jogging.

Le Theradome fournit automatiquement des mises à jour du traitement toutes les 5 minutes et s'éteint une fois le traitement terminé.

Si vous souhaitez connaître le temps restant manuellement, appuyez sur l'interrupteur principal (moins d'une seconde) pendant le traitement pour entendre une lecture vocale indiquant le temps restant de votre session actuelle.

Si vous retirez le casque de votre tête, le traitement en cours sera interrompu. Vous avez jusqu'à 5 minutes pour reprendre le traitement avant que la session ne soit terminée.

Le Theradome s'éteint automatiquement lorsque le traitement est terminé. Pour interrompre une session en cours, appuyez sur l'interrupteur principal et maintenez-le enfoncé.

Étape 5 : Après le traitement, n'oubliez pas :

Retirez l'appareil de votre tête.

Branchez le chargeur et attachez le câble micro-USB au port de charge.

Appliquez des produits capillaires comme vous le souhaitez

Programme de traitement

Réparation - Stades de croissance

Theradome PRO est autorisé par la FDA pour deux séances de 20 minutes par semaine.

Theradome EVO est autorisé par la FDA pour quatre séances de 20 minutes par semaine.

Pour de meilleurs résultats :

- Utilisez-le à l'intérieur ; l'appareil n'est pas conçu pour être utilisé à l'extérieur.
- Utilisez-le uniquement sur des cheveux secs ou humides ; ne l'utilisez pas sur des cheveux mouillés.
- Les lampes Theradome fonctionnent mieux dans un environnement frais (68° F / 20°C).
- N'appliquez des produits topiques pour le cuir chevelu ou les cheveux qu'après un traitement Theradome, et non avant.
- Exposez votre cuir chevelu en brossant et en séparant vos cheveux avant le traitement.
- N'interrompez pas les traitements existants pour les cheveux ou le cuir chevelu lorsque vous commencez un traitement Theradome. Consultez votre médecin pour élaborer une stratégie visant à réduire la dose au fil du temps.
- Ne mettez pas votre Theradome en pause pendant le traitement.
- La surutilisation et la sous-utilisation peuvent diminuer l'efficacité du traitement. Consultez theradome.com pour toute question.
- Prenez des photos mensuelles de votre croissance capillaire et de votre cuir chevelu, sous un éclairage naturel constant, avec le même positionnement et la même coiffure pour suivre les progrès. (Voir la section "Prendre des photos avant et après", p. 23).
- Restez motivé et soyez patient ! Cela doit faire partie de votre routine, comme le brossage des dents.

Étapes du traitement

A quoi s'attendre

THERADOME PRO LH80

THERADOME EVO LH40

Étapes du traitement du Theradome PRO et du Theradome EVO

Basés sur des essais cliniques, les diagrammes ci-dessous illustrent la progression à laquelle la plupart des personnes peuvent s'attendre lorsqu'elles effectuent le nombre recommandé de traitements par semaine.

Phases progressives lorsque PRO est utilisé pendant deux séances de 20 minutes par semaine et lorsque EVO est utilisé pendant quatre séances de 20 minutes par semaine (ou un jour sur deux).

	Réparation	1-3 Mois
	Cheveux sains	2-4 Mois
	Cheveux encore plus sains	4-6 Mois
	Croissance	6-9 Mois
	Maintenance	9 Mois et +

Les résultats de chaque utilisateur peuvent varier

Soyez patient, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre cuir chevelu et pour que le Theradome fonctionne !

Les traitements Theradome doivent être une routine similaire à celle du brossage des dents

Prendre des photos avant et après

La prise de photos avant et après est un élément clé de votre parcours de régénération capillaire, alors ne sautez pas cette étape ! Elle vous permet de suivre régulièrement vos progrès afin de pouvoir évaluer avec précision le moment où les cheveux deviennent plus épais et où de nouveaux cheveux commencent à pousser. Si vous travaillez avec un médecin ou un professionnel des soins capillaires, vous pouvez également partager vos photos avec eux pour orienter votre plan de traitement.

Pour de meilleurs résultats en matière de photos avant et après :

- Conservez une cohérence dans le positionnement, l'éclairage et l'angle de l'appareil photo pour toutes les photos.
- Demandez l'aide d'un autre photographe. N'essayez pas de prendre vos photos vous-même car nous voulons que vous obteniez la meilleure photo possible pour suivre vos progrès !
- N'utilisez PAS le flash de l'appareil photo.
- Utilisez uniquement la lumière naturelle.
- Réglez l'appareil photo sur la mise au point automatique.
- Utilisez le grossissement et la densité de pixels les plus élevés possibles tout en conservant une vue d'ensemble de votre tête.
- Prises de vue recommandées :
 - Vue frontale - penchez la tête en avant et prenez des photos de face.
 - Vue arrière - penchez la tête vers l'arrière et prenez des photos de l'arrière.
 - Vertex - photographiez directement depuis le haut.
- Vérifiez la clarté et la mise au point de toutes les photos avant de conclure la séance.
- Lavez, séchez et coiffez vos cheveux de la même manière pour chaque séance de photos.
- Pour une meilleure interprétation de vos résultats, regardez vos photos de progrès dans un environnement et un éclairage cohérent.

Prendre des photos avant et après

Préparation de la photo :

- 1) Assurez-vous d'être dans une pièce bien éclairée.
- 2) Utilisez toujours un éclairage naturel.
- 3) Placez-vous toujours devant un fond blanc, gris ou neutre.



le couleur



à votre cuir



Prise de vue :

- 1) 1) Tenez l'appareil photo à environ 45 cm de votre tête (ou suffisamment près pour capturer la totalité du cuir chevelu).
- 2) 2) Orientez la lentille à un angle de 45° par rapport au cuir chevelu.
- 3) 3) Prendre la photo.

Votre dossier personnel


Mon appareil (choisir une option)	<input type="checkbox"/> Theradome PRO <input type="checkbox"/> Theradome EVO	
Classification de perte de cheveux (choisir une option)	Homme <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IIIv <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> V	Femme <input type="checkbox"/> I-1 <input type="checkbox"/> I-2 <input type="checkbox"/> I-3 <input type="checkbox"/> I-4 <input type="checkbox"/> II-1 <input type="checkbox"/> II-2
Plan de traitement (choisir une option)	<input type="checkbox"/> Theradome PRO • Deux sessions de 20 min/semaine <input type="checkbox"/> Theradome EVO • Quatre sessions de 20 min /semaine	
Photo avant	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	

Type de shampooing ? _____ Date de début ? _____

Médicaments ? _____ Date de début ? _____

Complément ? _____ Date de début ? _____

Conseils d'entretien

 NE PAS placer le Theradome ou l'adaptateur électrique dans l'eau ou dans d'autres liquides. Si l'un des composants est mouillé, n'utilisez pas l'appareil.

Appelez le service clientèle au 1-855-549-6757 pour savoir comment procéder. Un appareil ou une batterie mouillés peuvent provoquer un choc électrique. Assurez-vous que tous les appareils sont éteints et débranchés de toute prise électrique. Si nécessaire, retirez la saleté ou les débris coincés sous la coque en plastique du casque.

Utilisez un chiffon humide pour nettoyer les plastiques. Ne pas mettre d'eau dans les événements du dôme.

- L'utilisation d'acétone ou d'autres solvants n'est pas recommandée.
- Les lampes n'ont pas besoin d'être nettoyées ou entretenues.
- Pour maintenir des performances de haute qualité, n'oubliez pas de nettoyer votre Theradome après chaque séance de traitement.

Conditions de fonctionnement et de stockage

Fonctionnement :

- Température entre 0 °C et 30 °C / 32 ° et 86 °F.
- Humidité relative entre 30 et 75 %, pas de condensation
- Pression atmosphérique entre 70 kPa and 105 kPa



Transport et stockage :

- Température entre -20 °C et 70 °C / -4 °F et 158 °F
- Humidité relative entre 10 and 90 %, pas de condensation
- Pression atmosphérique entre 70 kPa et 105 kPa
- Altitude (par rapport au niveau de la mer) -400 à 4500 mètres



Dimensions et poids :

- hauteur : 17.5 cm
- largeur : 19.5 cm
- longueur : 26.8 cm
- Poids 425 grammes, batterie incluse
- Tour de tête maximum: 65.4cm (25 3/4 in)



Lumière cohérente: 680nm, 5mW CW Divergence du faisceau de classe 3R : 8.8°

Chargeur CA : Entrée : 100-240V, 50 Hz/60 Hz ; Sortie : 5VDC, 1.5A; Output: 5VDC, 1.5A

Batterie : Li-Ion 3,7V 2200mAh IP22 –

Indice de protection contre les intrusions

Conforme à la norme IEC 60601-1-2, édition 4.0

Conforme à la norme IEC 60601-1, édition 3.0

Conforme à la norme IEC 60825-1, édition 3.0

Voir l'étiquette du produit sous le casque. IEC 60601-1-2



Type BF

Réponses aux Questions Fréquemment Posées

Question	Réponse
Qu'est-ce que la perte de cheveux ?	La perte de cheveux est un état qui fait qu'une personne perd de 50 à 100 cheveux par jour
Quelle est la cause de la perte de cheveux ?	La génétique est souvent à l'origine de la chute des cheveux. Cependant, d'autres facteurs comme les médicaments, les problèmes de peau, les changements hormonaux, le stress et les produits chimiques peuvent également causer la chute des cheveux.
Quel est le bon candidat pour l'utilisation du Theradome ?	Pour plus d'informations, voir les tableaux relatifs à la perte de cheveux et au type de peau aux pages 12-14
Quand puis-je espérer voir des résultats ?	Pour plus d'informations, voir le tableau des étapes du traitement à la page 22.
Combien de temps devrai-je poursuivre le traitement ?	Vous devrez utiliser le Theradome régulièrement jusqu'à ce que vous obteniez les résultats souhaités, puis effectuer des séances d'entretien moins fréquentes.
Puis-je utiliser d'autres traitements simultanément ?	Oui, il est possible d'utiliser le finestride, le minoxidil ou de subir une greffe de cheveux en même temps que Theradome. Assurez-vous toujours que votre cuir chevelu est propre et exempt de tout produit pendant le traitement. Appliquez les produits uniquement après vos séances de 20 minutes
Que sont les lumières cohérentes froides ?	La thérapie par laser de bas niveau est souvent appelée thérapie par lumière cohérente froide. Theradome utilise des lumières cohérentes froides qui délivrent de l'énergie à la base des follicules pileux pour une stimulation efficace. Nos lampes ne génèrent pas de chaleur
Y a-t-il des effets secondaires potentiels ?	Pendant la phase de réparation, les traitements peuvent être associés à des picotements du cuir chevelu, des démangeaisons ou de légers maux de tête, qui sont des signes de l'augmentation du flux sanguin et de la croissance des cheveux.

Réponses aux questions fréquemment posées

Question	Réponse
Quel shampooing utiliser pendant le traitement ?	Nous recommandons d'utiliser un shampooing antifongique médicamenteux pour réduire l'inflammation du cuir chevelu, nettoyer les cheveux et éradiquer tout champignon existant.
Le traitement sera-t-il efficace sur les cheveux blonds, blancs ou teints ?	Le Theradome est efficace sur toutes les couleurs de cheveux, qu'ils soient naturels ou teints.
Puis-je utiliser le Theradome si je suis enceinte ou si j'allaite ?	Nous vous déconseillons d'utiliser le Theradome si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, sauf accord spécifique de votre médecin.
Devrai-je utiliser le Theradome en permanence après la repousse de mes cheveux ?	Après avoir obtenu les résultats souhaités, il suffit de réduire la fréquence des traitements afin de maintenir la croissance de vos nouveaux cheveux.
Le casque doit-il être serré sur ma tête ?	L'appareil n'est pas conçu pour être serré. Les coussinets en mousse fournis permettent un meilleur ajustement pour les tours de tête inférieurs à 22 pouces. Évitez toute activité physique pendant vos séances de traitement de 20 minutes. Des activités telles que naviguer sur Internet, regarder la télévision ou lire un livre sont parfaitement compatibles avec l'utilisation du Theradome.
Ma peau est plus foncée ; puis-je quand même utiliser le Theradome ?	Le Theradome est autorisé par la FDA pour les types de peau Fitzpatrick 1-4. En raison d'un nombre limité de sujets, les données pour les types de peau 5-6 ne sont actuellement pas disponibles.

Dépannage

Problème	Solution
Le Theradome s'éteint pendant le traitement, et l'interrupteur principal émet une lumière verte. L'affichage vocal dit, "Placez sur la tête."	N'oubliez pas de placer votre Theradome correctement sur votre tête et de maintenir le casque à plat pendant le traitement, sinon l'appareil cessera de fonctionner.
Votre Theradome s'éteint pendant le traitement, et l'interrupteur principal émet une lumière orange. L'affichage vocal indique "Erreur - batterie faible".	La batterie est faible. Veuillez charger votre Theradome en le connectant à son chargeur.
Le Theradome s'éteint pendant le traitement, et l'interrupteur principal est de couleur jaune fixe. L'affichage vocal indique "Attention - température élevée".	Ce n'est pas le résultat d'une surchauffe du casque, cela indique simplement que la température de la pièce est trop élevée. Déplacez-vous vers un environnement plus frais (moins de 72° F) avant d'appuyer sur l'interrupteur principal pour reprendre le traitement. À l'avenir, évitez de suivre un traitement dans une pièce dont la température est supérieure à 72° F. La température optimale de fonctionnement doit rester entre 68° et 72° F. Le Theradome ne doit jamais être utilisé à l'extérieur.
Votre Theradome s'éteint pendant le traitement, et l'interrupteur principal clignote avec une lumière orange. L'affichage vocal indique "erreur système".	Votre Theradome a besoin de l'un des éléments suivants : 1) D'être chargé ou 2) Il peut avoir besoin d'une nouvelle batterie ou 3) Contactez le service clientèle pour que nous puissions résoudre le problème avec vous.

Dépannage

Problème	Solution
Le Theradome s'arrête en cours de traitement.	Votre Theradome n'est pas complètement chargé. Connectez le casque à son chargeur. Si vous rencontrez toujours des problèmes, essayez de brancher le casque sur une autre prise secteur.
Lorsque le Theradome est branché pour être chargé, l'interrupteur principal clignote avec une lumière orange.	Essayez d'abord de connecter votre Theradome à une autre prise secteur. Ensuite, il se peut que vous ayez besoin d'un nouvel adaptateur de chargeur secteur ou d'une nouvelle batterie, car le port USB n'est plus alimenté ou la batterie est épuisée et doit être remplacée. Contactez-nous afin que nous puissions résoudre le problème avec vous.
Batterie faible	Assurez-vous que votre Theradome est complètement chargé. Si le message de batterie faible est toujours présent, vous devez acheter une nouvelle batterie, directement sur notre site Web : theradome.com . Vous aurez besoin du numéro de série de votre Theradome pour commander une batterie.
Message d'erreur laser	Assurez-vous que la batterie de votre Theradome est complètement chargée. Si le message d'erreur du laser est toujours présent, veuillez contacter le service clients afin que nous puissions résoudre le problème avec vous.

Dépannage

Problème	Solution
Message d'erreur système	<p>Débranchez complètement votre casque et appuyez une fois brièvement sur le bouton de l'interrupteur principal (sans le maintenir enfoncé). Vous devriez entendre les mots "reprise du système".</p> <p>Débranchez votre casque, retournez-le (lasers vers le haut) et posez-le sur une surface plane.</p> <p>Placez votre main à l'intérieur du casque et appuyez sur l'interrupteur principal pour voir si les lasers s'allument et brillent sur votre main. Si les lasers ne s'allument pas, veuillez contacter le service clients pour obtenir de l'aide.</p>
Système en pause	<p>Si vous recevez un message "système en pause", l'interrupteur principal a été maintenu enfoncé trop longtemps.</p> <p>Pour sortir du mode " système en pause ", branchez le casque sur le chargeur. Le casque indiquera "le système redémarre" et vous pourrez débrancher le chargeur et appuyer sur le bouton de l'interrupteur principal pour commencer un traitement.</p> <p>Si vous ne recevez pas le message "reprise du système", branchez le chargeur sur une prise murale et rebranchez le chargeur USB sur le casque. Appuyez sur l'interrupteur principal et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.</p> <p>Ensuite, débranchez le casque du chargeur et appuyez sur l'interrupteur principal pendant une seconde (sans le maintenir).</p> <p>Si vous ne parvenez toujours pas à sortir du "système en pause", veuillez contacter le service clients.</p>

Garantie et Politique de remboursement

Assistance clients

Nous souhaitons que vous ayez une expérience réussie avec votre Theradome. Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de notre produit ou si vous avez des questions, veuillez appeler notre service clients au 1-855- 549-6757 ou nous envoyer un e-mail à l'adresse suivante : support@theradome.com.

Politique de remboursement

Consultez notre site Web pour obtenir des informations sur l'éligibilité et les autres exigences liées à notre politique de remboursement. Si vous avez des questions, veuillez appeler le service clients au 1-855-549-6757.

Garantie limitée d'un an

Nos casques Theradome bénéficient d'une garantie limitée d'un an pour les achats effectués sur notre site Internet ou auprès de revendeurs agréés. Nous garantissons nos casques laser contre les défauts de matériaux et de fabrication, les pannes de batterie ou de chargeur pour une période d'un an à compter de la date d'achat au détail. Notre garantie ne couvre pas les dommages accidentels ou une mauvaise utilisation.

Limites de garantie

Cette garantie ne s'applique pas aux : (a) dommages causés par un accident, un détournement, une mauvaise utilisation, une mauvaise application du Theradome PRO et du Theradome EVO (b) les dommages causés par un service (y compris les mises à niveau et les extensions) effectué par un prestataire de services non agréé par Theradome ; (c) aux produits ou pièces qui ont été modifiés sans l'autorisation écrite de Theradome Inc. ou (d) aux casques dont le numéro de série a été retiré ou effacé.

Garantie et Politique de Remboursement

Extension de garantie DomeCare

Protégez vos résultats de reconstitution capillaire grâce à notre programme d'extension de garantie. Veuillez noter que ce programme est réservé aux clients américains.

Le programme d'extension de garantie et de protection Domecare offre une couverture et une assistance complètes en cas de dommages accidentels ou de mauvaise utilisation, ainsi qu'en cas de défaillance mécanique ou opérationnelle, et ce pendant deux années supplémentaires en plus de votre garantie d'un an.

Obtenez votre couverture de garantie étendue en appelant le 1-855-549-6757 ou en visitant le site theradome.com.



Avis environnemental

Les appareils Theradome PRO et Theradome EVO comprennent une batterie lithium-ion ainsi que d'autres composants électriques.

Certains de ces composants sont classés comme des déchets non dangereux, bien que les règles de mise au rebut varient en fonction des réglementations nationales, régionales et locales.

Pour prolonger la durée de vie de la batterie de votre appareil, ne soumettez pas le casque à des températures élevées.

Pour en savoir plus sur nos nouvelles fonctionnalités,

veuillez visiter notre site Web à l'adresse

theradome.com

Pour toute assistance supplémentaire, veuillez nous
contacter à

Téléphone : +1-855-549-6757

Courriel support@theradome.com Site web :

theradome.com

06.18.2021_IFU_FRENCH_V20