








Veileder for maskebytte for ResMed helmasker med magnetiske klips¹






Følgende helmasker fra ResMed – AirFit™ F20, AirFit F20 for Her, AirTouch™ F20 AirFit F30 and AirFit F30i – inneholder magnetiske klips. I forlengelsen av oppdateringen av kontraindikasjoner og advarsler for disse maskene (vennligst se feltsikkerhetsvarselet vi har sendt) har vi i dette dokumentet listet opp alternative produkter fra den eksisterende ResMed-porteføljen. Dette som veiledning til en alternativ maske uten magneter for kontraindiserte pasienter.

For kompatibilitetsinformasjon, se produktets brukerveiledning eller Kompatibilitetsoversikt maske/apparat fra <https://www.resmed.no/helsepersonell/dokumentasjon/brukerveiledninger-og-tekniske-dokumenter/>




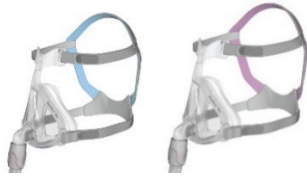

Denne informasjonen er ment som en veiledning for å gjøre det lettere å finne en anbefalt erstatningsmaske til din pasient. For å sikre best mulig tilpasning anbefaler vi å utføre en masketilpasningstest, og vennligst se den relevante brukerveiledningen for mer detaljert instruksjon, i tillegg til forholdsregler og advarsler.

	Helmaske med magnetiske klips ¹ : AirFit™ F20 /AirFit F20 for Her	Alternative helmasker uten magnetiske klips:			
	AirFit F20 Uten magneter	AirFit F30i Uten magneter	Quattro™ Air/ Quattro Air for Her	Mirage Quattro™	
					
Trykkområde	3-40 cmH ₂ O	3-40 cmH ₂ O	4-30 cmH ₂ O	3-40 cmH ₂ O	4-40 cmH ₂ O
Tilsvarende størrelser*	AirFit F20 SML	AirFit F20 Non Magnetic SML	AirFit F30i Non Magnetic S/SML	Quattro Air SML	Mirage Quattro SML
	AirFit F20 MED	AirFit F20 Non Magnetic MED	AirFit F30i Non Magnetic M/STD	Quattro Air MED	Mirage Quattro MED
	AirFit F20 LGE	AirFit F20 Non Magnetic LGE	AirFit F30i Non Magnetic W/STD	Quattro Air LGE	Mirage Quattro LGE
	AirFit F20 for Her SML	AirFit F20 Non Magnetic SML	AirFit F30i Non Magnetic S/SML	Quattro Air XSML/Quattro Air SML for Her	Mirage Quattro XSML / Mirage Quattro SML
	AirFit F20 for Her MED	AirFit F20 Non Magnetic MED	AirFit F30i Non Magnetic M/STD	Quattro Air MED for Her	Mirage Quattro MED
Produktkoder for maske-systemer	63410 -AirFit F20 SML Sys - EU2 63411 -AirFit F20 MED Sys - EU2 63412 -AirFit F20 LGE Sys - EU2 63413 -AirFit F20 for Her SML - EU2 63414 -AirFit F20 for Her MED - EU2 64010 -AirFit F20 SML Sys Quiet-EU4 64011 -AirFit F20 MED Sys Quiet-EU4 64012 -AirFit F20 LGE Sys Quiet-EU4 64013 -AirFit F20 for Her SML Quiet-EU4 64014 -AirFit F20 for Her MED Quiet-EU4	64031 -AirFit F20 NON MAGN SML Quiet-EU 64032 -AirFit F20 NON MAGN MED Quiet-EU 64033 -AirFit F20 NON MAGN LGE Quiet-EU	63341 - AirFit F30i NON MAGNET S/SML-EU 63343 - AirFit F30i NON MAGNET M/STD-EU 63344 - AirFit F30i NON MAGNET W/STD-EU	62709 -Quattro Air FFM SML-EUR2 62710 -Quattro Air FFM MED-EUR2 62711 -Quattro Air FFM LGE-EUR2 62746 -Quattro Air FFM for Her XSML-EUR2 62747 -Quattro Air FFM for Her SML-EUR2 62748 -Quattro Air FFM for Her MED-EUR2	61208 -Mirage Quattro FFM XSML-EUR2 61209 -Mirage Quattro FFM SML-EUR2 61210 -Mirage Quattro FFM MED-EUR2 61211 -Mirage Quattro FFM LGE-EUR2






Merk: Andre typer masker uten magnetisk klips inkluderer Mirage™, AirFit N20 Classic, AirFit N30i, AirFit N30 (nesemasker) og AirFit P10, AirFit P30i, Swift™ FX (neseputemasker). Besøk ResMed.com for mer informasjon om disse maskene.

	Helmaske med magnetiske klips ¹ :	Alternative helmasker uten magnetiske klips:			
	AirTouch™ F20	AirFit F20 Uten magneter	AirFit F30i Uten magneter	Quattro™ Air/ Quattro Air for Her	Mirage Quattro™
					
Trykk-område	3-40 cmH ₂ O	3-40 cmH ₂ O	4-30 cmH ₂ O	3-40 cmH ₂ O	4-40 cmH ₂ O
Tilsvarende størrelser*	AirTouch F20 SML	AirFit F20 Non Magnetic SML	AirFit F30i Non Magnetic S/SML	Quattro Air SML	Mirage Quattro SML
	AirTouch F20 MED	AirFit F20 Non Magnetic MED	AirFit F30i Non Magnetic M/STD	Quattro Air MED	Mirage Quattro MED
	AirTouch F20 LGE	AirFit F20 Non Magnetic LGE	AirFit F30i Non Magnetic W/STD	Quattro Air LGE	Mirage Quattro LGE
Produkt-koder for maske-systemer	63034 - AirTouch F20 SML Sys - EU 63035 - AirTouch F20 MED Sys - EU 63036 - AirTouch F20 LGE Sys - EU	64031 -AirFit F20 NON MAGN SML Quiet-EU 64032 -AirFit F20 NON MAGN MED Quiet-EU 64033 -AirFit F20 NON MAGN LGE Quiet-EU	63341 - AirFit F30i NON MAGNET S/SML-EU 63343 - AirFit F30i NON MAGNET M/STD-EU 63344 - AirFit F30i NON MAGNET W/STD-EU	62709 -Quattro Air SML-EUR2 62710 -Quattro Air MED-EUR2 62711 -Quattro Air LGE-EUR2 62746 -Quattro Air for Her XSML-EUR2 62747 -Quattro Air for Her SML-EUR2 62748 -Quattro Air for Her MED-EUR2 62751 -Quattro Air FFM for Her MED-EUR3	61208 -Mirage Quattro XSML-EUR2 61209 -Mirage Quattro SML- EUR2 61210 -Mirage Quattro MED-EUR2 61211 -Mirage Quattro LGE- EUR2

Merk: Andre typer masker uten magnetisk klips inkluderer Mirage™FX, AirFit N20 Classic, AirFit N30i, AirFit N30 (nese masker) og AirFit P10, AirFit P30i, Swift™ FX (neseputemasker). Besøk ResMed.com for mer informasjon om disse maskene.

	Helmaske med magnetiske klips ¹ :	Alternative helmasker uten magnetiske klips:			
	AirFit™ F30	AirFit F30i Uten magneter	AirFit F20 Uten magneter	Quattro™ Air/	Mirage Quattro™
					
Trykk-område	3-30 cmH ₂ O	4-30 cmH ₂ O	3-40 cmH ₂ O	3-40 cmH ₂ O	4-40 cmH ₂ O
Tilsvarende størrelser*	AirFit F30 SML	AirFit F30i Non Magnetic S/SML	AirFit F20 Non Magnetic SML	Quattro Air SML	Mirage Quattro SML
	AirFit F30 MED	AirFit F30i Non Magnetic M/STD	AirFit F20 Non Magnetic MED/ AirFit F20 Non Magnetic LGE	Quattro Air MED/ Quattro Air LGE	Mirage Quattro MED/ Mirage Quattro LGE
Produkt-koder for maske-systemer	64114 -AirFit F30 SML Sys MultiHole- EU 64115 -AirFit F30 MED Sys MultiHole- EU 64110 -AirFit F30 SML Sys – QuietAir 64111 -AirFit F30 MED Sys – QuietAir	63341 - AirFit F30i NON MAGNET S/SML-EU 63343 - AirFit F30i NON MAGNET M/STD-EU 63344 - AirFit F30i NON MAGNET W/STD-EU	64031 -AirFit F20 NON MAGN SML Quiet-EU 64032 -AirFit F20 NON MAGN MED Quiet-EU 64033 -AirFit F20 NON MAGN LGE Quiet-EU	62709 -Quattro Air SML-EUR2 62710 -Quattro Air MED-EUR2 62711 -Quattro Air LGE-EUR2 62746 -Quattro Air for Her XSML-EUR2 62747 -Quattro Air for Her SML-EUR2 62748 -Quattro Air for Her MED-EUR2	61208 -Mirage Quattro XSML-EUR2 61209 -Mirage Quattro SML- EUR2 61210 -Mirage Quattro MED-EUR2 61211 -Mirage Quattro LGE- EUR2

Merk: Andre typer masker uten magnetisk klips inkluderer Mirage™FX, AirFit N20 Classic, AirFit N30i, AirFit N30 (nese masker) og AirFit P10, AirFit P30i, Swift™ FX (neseputemasker). Besøk ResMed.com for mer informasjon om disse maskene.

	Helmaske med magnetiske klips ¹ :	Alternative helmasker uten magnetiske klips:			
	AirFit™ F30i	AirFit F30i Uten magneter	AirFit F20 Uten magneter	Quattro™ Air/ Quattro Air for Her	Mirage Quattro™
					
Trykkområde	4-30 cmH ₂ O	4-30 cmH ₂ O	3-40 cmH ₂ O	3-40 cmH ₂ O	4-40 cmH ₂ O
Tilsvarende størrelser*	AirFit F30i S/SML	AirFit F30i Non Magnetic S/SML	AirFit F20 Non Magnetic SML	Quattro Air XSML/ Quattro Air SML for Her	Mirage Quattro XSML/ Mirage Quattro SML
	AirFit F30i M/STD	AirFit F30i Non Magnetic M/STD	AirFit F20 Non Magnetic MED	Quattro Air MED	Mirage Quattro MED
	AirFit F30i W/STD	AirFit F30i Non Magnetic W/STD	AirFit F20 Non Magnetic LGE	Quattro Air LGE	Mirage Quattro LGE
Produkt-koder for maske-systemer	63310-AirFit F30i SYS - S/SML - EU 63312-AirFit F30i SYS - M/STD - EU 63313-AirFit F30i SYS - W/STD - EU	63341- AirFit F30i NON MAGNET S/SML-EU 63343- AirFit F30i NON MAGNET M/STD-EU 63344- AirFit F30i NON MAGNET W/STD-EU	64031-AirFit F20 NON MAGN SML Quiet-EU 64032-AirFit F20 NON MAGN MED Quiet-EU 64033-AirFit F20 NON MAGN LGE Quiet-EU	62709-Quattro Air SML-EUR2 62710-Quattro Air MED-EUR2 62711-Quattro Air LGE-EUR2 62746-Quattro Air for Her XSML-EUR2 62747-Quattro Air for Her SML-EUR2 62748-Quattro Air for Her MED-EUR2	61208-Mirage Quattro XSML-EUR2 61209-Mirage Quattro SML-EUR2 61210-Mirage Quattro MED-EUR2 61211-Mirage Quattro LGE-EUR2

Merk: Andre typer masker uten magnetisk klips inkluderer Mirage™FX, AirFit N20 Classic, AirFit N30i, AirFit N30 (nesemasker) og AirFit P10, AirFit P30i, Swift™ FX (neseputemasker). Besøk ResMed.com for mer informasjon om disse maskene.



Dette innholdet er kun beregnet på helsepersonell. Se kliniske veiledninger og brukerveiledninger for relevant informasjon om advarsler og forholdsregler som må tas i betraktning før og under bruk av produktet.

1. Masken inneholder magneter som kan forstyrre visse implantater eller medisinske apparater. De skal ikke brukes av pasienter der de, eller noen som er i nær fysisk kontakt når masken brukes, har aktive medisinske implantater som påvirkes av magneter og/eller metalliske implantater/gjenstander som inneholder ferromagnetiske materialer. Hold magnetene på en trygg avstand på minst 6 tommer (150 mm) til implantater eller medisinsk utstyr som kan bli negativt påvirket av magnetisk interferens. Se brukerveiledningen for fullstendig informasjon, inkludert kontraindikasjoner og advarsler for magneter.

*Tilgjengelighet av størrelser kan variere mellom ulike regioner.

AirFit, AirTouch, Mirage, Mirage Quattro, Quattro, Swift are trademarks of ResMed. Specifications may change without notice.
© 2023 ResMed. 10113748/4 NO 2024-02








Veileder for maskebytte for ResMed nesemasker med magnetiske klips¹






Følgende nesemasker fra ResMed – AirFit™ N20, AirFit N20 for Her, AirTouch™ N20, AirFit N10 and AirFit N10 for Her – inneholder magnetiske klips. I forlengelsen av oppdateringen av kontraindikasjoner og advarsler for disse maskene (vennligst se feltsikkerhetsvarselet vi har sendt) har vi i dette dokumentet listet opp alternative produkter fra den eksisterende ResMed-porteføljen. Dette som veiledning til en alternativ maske uten magneter for kontraindiserte pasienter.

For kompatibilitetsinformasjon, se produktets brukerveiledning eller Kompatibilitetsoversikt maske/apparat fra <https://www.resmed.no/helsepersonell/dokumentasjon/brukerveiledninger-og-tekniske-dokumenter/>






Denne informasjonen er ment som en veiledning for å gjøre det lettere å finne en anbefalt erstatningsmaske til din pasient. For å sikre best mulig tilpasning anbefaler vi å utføre en masketilpasningstest, og vennligst se den relevante brukerveiledningen for mer detaljert instruksjon, i tillegg til forholdsregler og advarsler.

	Nesemaske med magnetiske klips ¹ :	Alternative nesemasker uten magnetiske klips:			
	AirFit™ N20/ AirFit N20 for Her	Mirage™ FX/ Mirage FX for Her	AirFit N20 Classic	AirFit N30i	AirFit N30
					
Trykkområde	4-30 cmH ₂ O	4-20 cmH ₂ O	4-30 cmH ₂ O	4-25 cmH ₂ O	4-20 cmH ₂ O
Tilsvarende størrelser*	AirFit N20 SML	Mirage FX Standard/ Mirage FX for Her	AirFit N20 Classic SML	AirFit N30i S/SML	AirFit N30 ²
	AirFit N20 MED	Mirage FX Standard	AirFit N20 Classic MED	AirFit N30i M/STD	
	AirFit N20 LGE	Mirage FX Wide	AirFit N20 Classic LGE	AirFit N30i W/STD	
	AirFit N20 for Her SML	Mirage FX for Her	AirFit N20 Classic SML	AirFit N30i S/SML	
Produktkoder for maske-systemer	63514-AirFit N20 MED Sys - EU2 63515-AirFit N20 LGE Sys - EU2 63513-AirFit N20 SML (for Her) - EU2	62101-Mirage FX Mask Sys-EUR2 62116-Mirage FX Mask Sys WD-EUR2 62133-Mirage FX for Her Mask Sys - EUR2	63713-AirFit N20 Classic: Small - EU2 63714-AirFit N20 Classic: Medium - EU2 63715-AirFit N20 Classic: Large - EU2	63817-AirFit N30i SYS S/SML Quiet EU 63818-AirFit N30i SYS SW/SML Quiet EU 63819-AirFit N30i SYS M/STD Quiet EU 63820-AirFit N30i SYS W/STD Quiet EU 63880-AirFit N30i SYS S/SML MultiH EU 63881-AirFit N30i SYS SW/SML MultiH EU 63882-AirFit N30i SYS M/STD MultiH EU 63883-AirFit N30i SYS W/STD MultiH EU	64204-AirFit N30 Mask SYS EU 64205-AirFit N30 Mask SYS MultiHole EU

Merk: Neseputemasker uten magnetiske klips inkluderer AirFit P10, AirFit P30i, Swift FX. Helmasker uten magnetiske klips inkluderer Quattro Air og Mirage Quattro. Besøk ResMed.com for mer informasjon om disse maskene.

	Nesemaske med magnetiske klips ¹ :	Alternative nesemasker uten magnetiske klips:			
	AirTouch™ N20	Mirage™ FX/ Mirage FX for Her	AirFit N20 Classic	AirFit N30i	AirFit N30
					
Trykkområde	4-30 cmH ₂ O	4-20 cmH ₂ O	4-30 cmH ₂ O	4-25 cmH ₂ O	4-20 cmH ₂ O
Tilsvarende størrelser*	AirTouch N20 SML	Mirage FX Standard / Mirage FX for Her	AirFit N20 Classic SML	AirFit N30i S/SML	AirFit N30 ²
	AirTouch N20 MED	Mirage FX Standard	AirFit N20 Classic MED	AirFit N30i M/STD	
	AirTouch N20 LGE	Mirage FX Wide	AirFit N20 Classic LGE	AirFit N30i W/STD	
Produktkoder for maske-systemer	63909 -AirTouch N20 SML SYS- EU 63911 -AirTouch N20 MED SYS - EU 63912 -AirTouch N20 LGE SYS - EU	62101 -Mirage FX Mask Sys- EUR2 62116 -Mirage FX Mask Sys WD-EUR2 62133 -Mirage FX for Her Mask Sys - EUR2	63713 -AirFit N20 Classic: Small - EU2 63714 -AirFit N20 Classic: Medium - EU2 63715 -AirFit N20 Classic: Large - EU2	63817 -AirFit N30i SYS S/SML Quiet EU 63818 -AirFit N30i SYS SW/SML Quiet EU 63819 -AirFit N30i SYS M/STD Quiet EU 63820 -AirFit N30i SYS W/STD Quiet EU 63880 -AirFit N30i SYS S/SML MultiH EU 63881 -AirFit N30i SYS SW/SML MultiH EU 63882 -AirFit N30i SYS M/STD MultiH EU 63883 -AirFit N30i SYS W/STD MultiH EU	64204 -AirFit N30 Mask SYS EU 64205 -AirFit N30 Mask SYS MultiHole EU

Merk: Neseputemasker uten magnetiske klips inkluderer AirFit P10, AirFit P30i, Swift FX. Helmasker uten magnetiske klips inkluderer Quattro Air og Mirage Quattro. Besøk ResMed.com for mer informasjon om disse maskene.

	Nesemaske med magnetiske klips ¹ : AirFit™ N10/AirFit N10 for Her**	Alternative nesemasker uten magnetiske klips: Mirage™ FX/Mirage FX for Her AirFit N20 Classic AirFit N30i AirFit N30			
					
Trykkområde	4-30 cmH ₂ O	4-20 cmH ₂ O	4-30 cmH ₂ O	4-25 cmH ₂ O	4-20 cmH ₂ O
Tilsvarende størrelser*	AirFit N10 SML	Mirage FX Standard / Mirage FX for Her	AirFit N20 Classic SML	AirFit N30i S/SML	AirFit N30 ²
	AirFit N10 MED	Mirage FX Standard	AirFit N20 Classic MED	AirFit N30i M/STD	
	AirFit N10 WIDE	Mirage FX Wide	AirFit N20 Classic LGE	AirFit N30i W/STD	
	AirFit N10 for Her SML	Mirage FX for Her	AirFit N20 Classic SML	AirFit N30i S/SML	
Produktkoder for maske-systemer	63212- AirFit N10 Std Sys - EU2 63214- AirFit N10 Wide Sys - EU2 63213- AirFit N10 for Her Sys - EU2	62101-Mirage FX Mask Sys-EUR2 62116-Mirage FX Mask Sys WD-EUR2 62133-Mirage FX for Her Mask Sys - EUR2	63713-AirFit N20 Classic: Small - EU2 63714-AirFit N20 Classic: Medium - EU2 63715-AirFit N20 Classic: Large - EU2	63817-AirFit N30i SYS S/SML Quiet EU 63818-AirFit N30i SYS SW/SML Quiet EU 63819-AirFit N30i SYS M/STD Quiet EU 63820-AirFit N30i SYS W/STD Quiet EU 63880-AirFit N30i SYS S/SML MultiH EU 63881-AirFit N30i SYS SW/SML MultiH EU 63882-AirFit N30i SYS M/STD MultiH EU 63883-AirFit N30i SYS W/STD MultiH EU	64204-AirFit N30 Mask SYS EU 64205-AirFit N30 Mask SYS MultiHole EU

Merk: Neseputemasker uten magnetiske klips inkluderer AirFit P10, AirFit P30i, Swift FX. Helmasker uten magnetiske klips inkluderer Quattro Air og Mirage Quattro. Besøk ResMed.com for mer informasjon om disse maskene.



Dette innholdet er kun beregnet på helsepersonell. Se kliniske veiledninger og brukerveiledninger for relevant informasjon om advarsler og forholdsregler som må tas i betraktning før og under bruk av produktet.

1. Masken inneholder magneter som kan forstyrre visse implantater eller medisinske apparater. De skal ikke brukes av pasienter der de, eller noen som er i nær fysisk kontakt når masken brukes, har aktive medisinske implantater som påvirkes av magneter og/eller metalliske implantater/gjenstander som inneholder ferromagnetiske materialer. Hold magnetene på en trygg avstand på minst 6 tommer (150 mm) til implantater eller medisinsk utstyr som kan bli negativt påvirket av magnetisk interferens. Se brukerveiledningen for fullstendig informasjon, inkludert kontraindikasjoner og advarsler for magneter.
2. AirFit N30 leveres med maskeputer i både S- og M-størrelse.

* Tilgjengelighet av størrelser kan variere mellom ulike regioner.

** AirFit N10 og AirFit N10 for Her er faset ut av ResMeds portefølje. Ettersom de fortsatt kan finnes på markedet, er de imidlertid oppført i dette dokumentet for å hjelpe deg med å overføre kontraindiserte pasienter som fortsatt bruker disse maskene.

AirFit, AirTouch, Mirage, Swift are trademarks of ResMed. Specifications may change without notice.

© 2023 ResMed. 10113747/3 NO 2023-10





Veileder for maskebytte for ResMed ikke-ventilerte masker med magnetiske klips¹

AirFit™ F20 NV ResMed ikke-ventilert helmaske inneholder magnetiske klips. I forlengelsen av oppdateringen av kontraindikasjoner og advarsler for disse maskene (vennligst se feltsikkerhetsvarselet vi har sendt) har vi i dette dokumentet listet opp alternative produkter fra den eksisterende ResMed-porteføljen. Dette som veiledning til en alternativ maske uten magneter for kontraindiserte pasienter.

For kompatibilitetsinformasjon, se produktets brukerveiledning eller Kompatibilitetsoversikt maske/apparat fra <https://www.resmed.no/helsepersonell/dokumentasjon/brukerveiledninger-og-tekniske-dokumenter/>

Denne informasjonen er ment som en veiledning for å gjøre det lettere å finne en anbefalt erstatningsmaske til din pasient. For å sikre best mulig tilpasning anbefaler vi å utføre en masketilpasningstest, og vennligst se den relevante brukerveiledningen for mer detaljert instruksjon, i tillegg til forholdsregler og advarsler.

	Ikke-ventilert helmaske med magnetiske klips ¹ :	Alternativ ikke-ventilert helmaske uten magnetiske klips:
	AirFit™ F20 NV	Quattro™ Air NV
		
Trykkområde	3-40 cmH ₂ O	0-40 cmH ₂ O
Tilsvarende størrelser*	AirFit F20 NV SML	NV Quattro Air FFM SML
	AirFit F20 NV MED	NV Quattro Air FFM MED
	AirFit F20 NV LGE	NV Quattro Air FFM LGE
Produktkoder for maskesystemer	64020 -AIRFIT F20 NV SML SYS ROW 64021 -AIRFIT F20 NV MED SYS ROW 64022 -AIRFIT F20 NV LGE SYS ROW	62782 -NV Quattro Air FFM XSML - EUR 62783 -NV Quattro Air FFM SML - EUR 62784 -NV Quattro Air FFM MED - EUR 62785 -NV Quattro Air FFM LGE - EUR

Dette innholdet er kun beregnet på helsepersonell. Se kliniske veiledninger og brukerveiledninger for relevant informasjon om advarsler og forholdsregler som må tas i betraktning før og under bruk av produktet.

1. Masken inneholder magneter som kan forstyrre visse implantater eller medisinske apparater. De skal ikke brukes av pasienter der de, eller noen som er i nær fysisk kontakt når masken brukes, har aktive medisinske implantater som påvirkes av magneter og/eller metalliske implantater/gjenstander som inneholder ferromagnetiske materialer. Hold magnetene på en trygg avstand på minst 6 tommer (150 mm) til implantater eller medisinsk utstyr som kan bli negativt påvirket av magnetisk interferens. Se brukerveiledningen for fullstendig informasjon, inkludert kontraindikasjoner og advarsler for magneter.

* Tilgjengelighet av størrelser kan variere mellom ulike regioner.