








Guide till maskalternativ utan magneter - helmasker¹




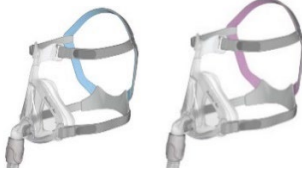

Följande helmasker från ResMed – AirFit™ F20, AirFit F20 for Her, AirFit F30 och AirFit F30i – har magnetiska clips. Efter uppdateringen av de befintliga kontraindikationerna och varningarna för denna mask (se Säkerhetsmeddelande som vi skickat), visar detta dokument en alternativ mask utan magneter till patienter med kontraindikationer.

För information om kompatibilitet, se produktens användarguide / kliniska guide eller kompatibilitetslistan för mask/apparat på [ResMed.com/downloads/masks](https://www.resmed.com/downloads/masks).






Denna information fungerar som en vägledning för att du bättre ska kunna identifiera det rekommenderade maskbytet för din patient. För att säkerställa bästa möjliga passform för din patient ska du göra en maskutprovning. Se relevant användarguide / klinisk guide för mer detaljerade instruktioner och försiktighetsåtgärder.

	Helmask med magnetiska clips ¹ :	Alternativa helmasker utan magnetiska clips:			
	AirFit™ F20/ AirFit F20 for Her	AirFit F20 Non Magnetic	AirFit F30i Non Magnetic	Quattro™ Air/ Quattro Air for Her	Mirage Quattro™
					
Tryckintervall	3-40 cmH ₂ O	3-40 cmH ₂ O	4-30 cmH ₂ O	4-30 cmH ₂ O	4-40 cmH ₂ O
Storleks- konverteringar *	AirFit F20 Small	AirFit F20 Non Magnetic Small	AirFit F30i Non Magnetic S/Standard	Quattro Air Small	Mirage Quattro Small
	AirFit F20 Medium	AirFit F20 Non Magnetic Medium	AirFit F30i Non Magnetic M/Standard	Quattro Air Medium	Mirage Quattro Medium
	AirFit F20 Large	AirFit F20 Non Magnetic Large	AirFit F30i Non Magnetic W/Standard	Quattro Air Large	Mirage Quattro Large
	AirFit F20 for Her Small	AirFit F20 Non Magnetic Small	AirFit F30i Non Magnetic S/Small	Quattro Air for Her Extra Small/ Quattro Air for Her Small	Mirage Quattro Extra Small/ Mirage Quattro Small
	AirFit F20 for Her Medium	AirFit F20 Non Magnetic Medium	AirFit F30i Non Magnetic M/Standard	Quattro Air for Her Medium	Mirage Quattro Medium
Masksystem artikelnummer	63410-AirFit F20 Small - Standard knärör 63411-AirFit F20 Medium - Standard knärör 63412-AirFit F20 Large - Standard knärör 63413-AirFit F20 for Her Small - Standard knärör 63414-AirFit F20 for Her Medium - Standard knärör 64010-AirFit F20 Small - Quiet Air 64011-AirFit F20 Medium - Quiet Air 64012-AirFit F20 Large - Quiet Air 64013-AirFit F20 for Her Small - Quiet Air 64014-AirFit F20 for Her Medium - Quiet Air	64031-AirFit F20 Non Magnetic Small Quiet Air 64032-AirFit F20 Non Magnetic Medium Quiet Air 64033-AirFit F20 Non Magnetic Large Quiet Air	63341- AirFit F30i Non Magnetic S/Small 63342- AirFit F30i Non Magnetic S/Standard 63343- AirFit F30i Non Magnetic M/Standard 63344- AirFit F30i Non Magnetic W/Standard 63345- AirFit F30i Non Magnetic M/Large	62709-Quattro Air Small 62710-Quattro Air Medium 62711-Quattro Air Large 62746-Quattro Air for Her Extra Small 62747-Quattro Air for Her Small 62748-Quattro Air for Her Medium	61208-Mirage Quattro Extra Small 61209-Mirage Quattro Small 61210-Mirage Quattro Medium 61211-Mirage Quattro Large

N.B. Andra typer av masker utan magnetiska clips är t.ex. Mirage™ FX, AirFit N20 Classic, AirFit N30i, AirFit N30 (näsmasker) och AirFit P10, AirFit P30i, Swift™ FX (näsuddemasker).
Besök ResMed.com för mer information om dessa masker.

	Helmask med magnetiska clips ¹ :	Alternativa helmasker utan magnetiska clips:			
	AirFit™ F30	AirFit F30i Non Magnetic	AirFit F20 Non Magnetic	Quattro™ Air/ Quattro Air for Her	Mirage Quattro™
					
Tryckintervall	3-30 cmH ₂ O	4-30 cmH ₂ O	3-40 cmH ₂ O	3-40 cmH ₂ O	4-40 cmH ₂ O
Storleks-konverteringar *	AirFit F30 Small	AirFit F30i Non Magnetic S/Standard	AirFit F20 Non Magnetic Small	Quattro Air Small	Mirage Quattro Small
	AirFit F30 Medium	AirFit F30i Non Magnetic M/Standard	AirFit F20 Non Magnetic Medium/ AirFit F20 Non Magnetic Large	Quattro Air Medium/ Quattro Air Large	Mirage Quattro Medium/ Mirage Quattro Large
Masksystem artikelnummer	64110 -AirFit F30 Small - Quiet Air 64111 -AirFit F30 Medium - Quiet Air 64114 -AirFit F30 Small - Standard knärör 64115 -AirFit F30 Medium - Standard knärör	63341 - AirFit F30i Non Magnetic S/Small 63342 - AirFit F30i Non Magnetic S/Standard 63343 - AirFit F30i Non Magnetic M/Standard 63344 - AirFit F30i Non Magnetic W/Standard 63345 - AirFit F30i Non Magnetic M/Large	64031 -AirFit F20 Non Magnetic Small Quiet Air 64032 -AirFit F20 Non Magnetic Medium Quiet Air 64033 -AirFit F20 Non Magnetic Large Quiet Air	62709 -Quattro Air Small 62710 -Quattro Air Medium 62711 -Quattro Air Large 62746 -Quattro Air for Her Extra Small 62747 -Quattro Air for Her Small 62748 -Quattro Air for Her Medium	61208 -Mirage Quattro Extra Small 61209 -Mirage Quattro Small 61210 -Mirage Quattro Medium 61211 -Mirage Quattro Large

N.B. Andra typer av masker utan magnetiska clips är t.ex. Mirage™ FX, AirFit N20 Classic, AirFit N30i, AirFit N30 (näsmasker) och AirFit P10, AirFit P30i, Swift™ FX (näskuddemasker).
 Besök ResMed.com för mer information om dessa masker.

	Helmask med magnetiska clips ¹ :	Alternativa helmasker utan magnetiska clips:			
	AirFit™ F30i	AirFit F30i Non Magnetic	AirFit F20 Non Magnetic	Quattro™ Air/ Quattro Air for Her	Mirage Quattro™
					
Tryckintervall	4-30 cmH ₂ O	4-30 cmH ₂ O	3-40 cmH ₂ O	3-40 cmH ₂ O	4-40 cmH ₂ O
Storlekskonverteringar *	AirFit F30i S/Small	AirFit F30i Non Magnetic S/Small	AirFit F20 Non Magnetic Small	Quattro Air Extra Small/ Quattro Air Small for Her	Mirage Quattro Extra Small/ Mirage Quattro Small
	AirFit F30i S/Standard	AirFit F30i Non Magnetic S/Standard	AirFit F20 Non Magnetic Small	Quattro Air Small	Mirage Quattro Small
	AirFit F30i M/Standard	AirFit F30i Non Magnetic M/Standard	AirFit F20 Non Magnetic Medium	Quattro Air Medium	Mirage Quattro Medium
	AirFit F30i M/Large	AirFit F30i Non Magnetic M/Large	AirFit F20 Non Magnetic Medium	Quattro Air Medium	Mirage Quattro Medium
	AirFit F30i W/Standard	AirFit F30i Non Magnetic W/Standard	AirFit F20 Non Magnetic Large	Quattro Air Large	Mirage Quattro Large
Masksystem artikelnummer	63310 -AirFit F30i S/Small 63311 -AirFit F30i S/Standard* 63312 -AirFit F30i M/Standard 63313 -AirFit F30i W/Standard 63314 -AirFit F30i M/Large*	63341 - AirFit Non Magnetic S/Small 63342 - AirFit F30I Non Magnetic S/Standard 63343 - AirFit F30I Non Magnetic M/Standard 63344 - AirFit F30I Non Magnetic W/Standard 63345 - AirFit F30I Non Magnetic M/Large	64031 -AirFit F20 Non Magnetic Small Quiet Air 64032 -AirFit F20 Non Magnetic Medium Quiet Air 64033 -AirFit F20 Non Magnetic Large Quiet Air	62709 -Quattro Air Small 62710 -Quattro Air Medium 62711 -Quattro Air Large 62746 -Quattro Air for Her Extra Small 62747 -Quattro Air for Her Small 62748 -Quattro Air for Her Medium	61208 -Mirage Quattro Extra Small 61209 -Mirage Quattro Small 61210 -Mirage Quattro Medium 61211 -Mirage Quattro Large

N.B. Andra typer av masker utan magnetiska clips är t.ex. Mirage™ FX, AirFit N20 Classic, AirFit N30i, AirFit N30 (näsmasker) och AirFit P10, AirFit P30i, Swift™ FX (näskuddemasker). Besök ResMed.com för mer information om dessa masker.

* Kan endast köpas av privatpersoner, direkt från vår webshop eller av återförsäljare



Detta innehåll är endast avsett för vårdgivare För relevant information om eventuella varningar och försiktighetsåtgärder som ska beaktas före och under användning av produkten hänvisas till de kliniska guiderna och användarguiderna.

1. Masken innehåller magneter som kan störa vissa implantat eller medicintekniska produkter. De ska inte användas av patienter där de, eller någon annan i nära fysisk kontakt när masken används, har aktiva medicinska implantat som interagerar med magneter och/eller metalliska implantat/föremål som innehåller ferromagnetiskt material. Håll maskens magneter på ett säkert avstånd på minst 150 mm från implantat eller medicinsk utrustning som kan påverkas negativt av magnetiska störningar. Se användarguiden för fullständig information, inklusive kontraindikationer och varningar för magneter.

* Storlekstillgängligheten kan variera mellan olika regioner.

AirFit, AirTouch, Mirage, Mirage Quattro, Quattro, Swift är varumärken som tillhör ResMed. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

© 2023 ResMed. 10113748/4-SE 2024-02

ResMed.com








Guide till maskalternativ utan magneter - näsmasker¹


Följande näsmasker från ResMed - AirFit™ N20, AirFit N20 for Her, AirFit N10 och AirFit N10 for Her – har magnetiska clips. Efter uppdateringen av de befintliga kontraindikationerna och varningarna för denna mask (se Säkerhetsmeddelande som vi skickat), visar detta dokument en alternativ mask utan magneter till patienter med kontraindikationer.

För information om kompatibilitet, se produktens användarguide / kliniska guide eller kompatibilitetslistan för mask/apparat på [ResMed.com/downloads/masks](https://www.resmed.com/downloads/masks).

Denna information fungerar som en vägledning för att du bättre ska kunna identifiera det rekommenderade maskbytet för din patient. För att säkerställa bästa möjliga passform för din patient ska du göra en maskutprovning. Se relevant användarguide / klinisk guide för mer detaljerade instruktioner och försiktighetsåtgärder.

	Näsmask med magnetiska clips ¹ :	Alternativa näsmasker utan magnetiska clips:			
	AirFit™ N20/ AirFit N20 for Her	AirFit N20 Classic	Mirage™ FX/ Mirage FX for Her	AirFit N30i	AirFit N30
					
Tryckintervall	4-30 cmH ₂ O	4-20 cmH ₂ O	4-30 cmH ₂ O	4-25 cmH ₂ O	4-20 cmH ₂ O
Storleks-konverteringar *	AirFit N20 for Her Small	AirFit N20 Classic Small	Mirage FX for Her	AirFit N30i S/Small	AirFit N30 ²
	AirFit N20 Medium	AirFit N20 Classic Medium	Mirage FX Standard	AirFit N30i M/Standard	
	AirFit N20 Large	AirFit N20 Classic Large		AirFit N30i W/Standard	
Masksystem artikelnummer	63513-AirFit N20 for Her Small 63514-AirFit N20 Medium 63515-AirFit N20 Large	63714-AirFit N20 Classic Medium 63715-AirFit N20 Classic Large 63716-AirFit N20 Classic Small	62101-Mirage FX Mask 62133-Mirage FX for Her Mask	63880-AirFit N30i S/Small 63881-AirFit N30i SW/Small 63882-AirFit N30i M/Standard 63883-AirFit N30i W/Standard 63817- AirFit N30i S/Small Quiet Air 63818- AirFit N30i SW/Small Quiet Air 63819- AirFit N30i M/ Standard Quiet Air 63820- AirFit N30i W/ Standard Quiet Air	64204-AirFit N30 Mask 64205-AirFit N30 Mask

N.B. Näskuddemasker utan magnetclips inkluderar AirFit P10, AirFit P30i, Swift FX. Helmasker utan magnetiska clips inkluderar Quattro Air och Mirage Quattro. Besök ResMed.com för mer information om dessa masker.

	Näsmask med magnetiska clips ¹ :	Alternativa näsmasker utan magnetiska clips:			
	AirFit™ N10/ AirFit N10 for Her**	AirFit N20 Classic	Mirage™ FX/ Mirage FX for Her	AirFit N30i	AirFit N30
					
Tryckintervall	4-30 cmH ₂ O	4-20 cmH ₂ O	4-30 cmH ₂ O	4-25 cmH ₂ O	4-20 cmH ₂ O
Storleks-konverteringar *	AirFit N10 for Her Small	AirFit N20 Classic Small	Mirage FX for Her	AirFit N30i S/Small	AirFit N30 ²
	AirFit N10 Medium	AirFit N20 Classic Medium	Mirage FX Standard	AirFit N30i M/Standard	
	AirFit N10 Wide	AirFit N20 Classic Large		AirFit N30i W/Standard	
Masksystem artikelnummer	63212-AirFit N10 Standard 63214-AirFit N10 Wide 63213-AirFit N10 for Her	62101-Mirage FX Mask 62133-Mirage FX for Her Mask	63714-AirFit N20 Classic Medium 63715-AirFit N20 Classic Large 63716-AirFit N20 Classic Small	63880-AirFit N30i S/Small Standard 63881-AirFit N30i SW/Small Standard 63882-AirFit N30i M/Standard 63883-AirFit N30i W/Standard 63817-AirFit N30i S/Small Quiet Air 63818-AirFit N30i SW/Small Quiet Air 63819-AirFit N30i M/ Standard Quiet Air 63820-AirFit N30i W/ Standard Quiet Air	64204-AirFit N30 Mask 64205-AirFit N30 Mask

N.B. Näskuddemasker utan magnetclips inkluderar AirFit P10, AirFit P30i, Swift FX. Helmasker utan magnetiska clips inkluderar Quattro Air och Mirage Quattro. Besök ResMed.com för mer information om dessa masker.



Detta innehåll är endast avsett för vårdgivare För relevant information om eventuella varningar och försiktighetsåtgärder som ska beaktas före och under användning av produkten hänvisas till de kliniska guiderna och användarguiderna.

1. Masken innehåller magneter som kan störa vissa implantat eller medicintekniska produkter. De ska inte användas av patienter där de, eller någon annan i nära fysisk kontakt när masken används, har aktiva medicinska implantat som interagerar med magneter och/eller metalliska implantat/föremål som innehåller ferromagnetiskt material. Håll maskens magneter på ett säkert avstånd på minst 150 mm från implantat eller medicinsk utrustning som kan påverkas negativt av magnetiska störningar. Se användarguiden för fullständig information, inklusive kontraindikationer och varningar för magneter.
2. AirFit N30 levereras med både S och M mjukdel.

* Storlekstillgängligheten kan variera mellan olika regioner.

** AirFit N10 och AirFit N10 for Her har fasats ut ur ResMeds sortiment. Eftersom de fortfarande kan finnas på marknaden listas de dock i detta dokument för att hjälpa dig vid övergången till kontraindicerade patienter som fortfarande använder dessa masker.

AirFit, AirTouch, Mirage, Swift är varumärken som tillhör ResMed. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

© 2023 ResMed. 10113747/3-SE 2023-10





Guide till maskalternativ utan magneter - icke-ventilerade masker ¹

ResMed AirFit™ F20 NV icke-ventilerad helmask har magnetiska clips. Efter uppdateringen av de befintliga kontraindikationerna och varningarna för denna mask (se Säkerhetsmeddelande som vi skickat), visar detta dokument en alternativ mask utan magneter till patienter med kontraindikationer.

För information om kompatibilitet, se produktens användarguide / kliniska guide eller kompatibilitetslistan för mask/apparat på [ResMed.com/downloads/masks](https://www.resmed.com/downloads/masks).

Denna information fungerar som en vägledning för att du bättre ska kunna identifiera det rekommenderade maskbytet för din patient. För att säkerställa bästa möjliga passform för din patient ska du göra en maskutprovning. Se relevant användarguide / klinisk guide för mer detaljerade instruktioner och försiktighetsåtgärder.

	Icke-ventilerad helmask med magnetiska clips ¹ :	Icke-ventilerad helmask utan magnetiska clips ¹ :
	AirFit™ F20 NV	Quattro™ Air NV
		
Tryckintervall	3-40 cmH ₂ O	0-40 cmH ₂ O
Storleks-konverteringar *	AirFit F20 NV Small	Quattro Air NV Small
	AirFit F20 NV Medium	Quattro Air NV Medium
	AirFit F20 NV Large	Quattro Air NV Large
Masksystem artikelnummer	64020 -AirFit F20 NV Small 64021 -AirFit F20 NV Medium 64022 -AirFit F20 NV Large	62782 -Quattro Air NV Air Extra Small 62783 -Quattro Air NV Small 62784 -Quattro Air NV Medium 62785 -Quattro Air NV Large

Detta innehåll är endast avsett för vårdgivare För relevant information om eventuella varningar och försiktighetsåtgärder som ska beaktas före och under användning av produkten hänvisas till de kliniska guiderna och användarguiderna.

1. Masken innehåller magneter som kan störa vissa implantat eller medicintekniska produkter. De ska inte användas av patienter där de, eller någon annan i nära fysisk kontakt när masken används, har aktiva medicinska implantat som interagerar med magneter och/eller metalliska implantat/föremål som innehåller ferromagnetiskt material. Håll maskens magneter på ett säkert avstånd på minst 150 mm från implantat eller medicinsk utrustning som kan påverkas negativt av magnetiska störningar. Se användarguiden för fullständig information, inklusive kontraindikationer och varningar för magneter.

* Storlekstillgängligheten kan variera mellan olika regioner.